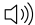


Questions & Answers

1- The thermometer is not turning on

The batteries are not inserted properly. Please insert the batteries paying attention to the + and - poles. Look at the Quick Start to see the proper insertion direction.

2- How to turn the sound On/Off?

1. When the device is On, press the  button to set the sound to On or Off.
2. The LCD screen will show ON when the sound is activated, and OFF when the sound is muted.

3- How to switch from °C to °F

When the device is on, press "MODE" button for 2 seconds. The screen will display "F1", then press "Mode" to switch between °C to °F . Press "Mem" button to save.

4- How to switch to the Mode?

Press the "Mode" button to select from "Body", "Room" or "Surface Temperature" mode.

5- Why does the screen displays "HI"?

It means that the temperature is higher than the maximum of the measurement range: 42.9°C in Body Mode and 60°C in Surface Temperature Mode.

6- The results are different compared to other thermometers. Is it normal?

YES. It is normal to obtain different results depending on the type of thermometer used (frontal, ear, oral or rectal).

PLEASE REFRAIN FROM COMPARING RESULTS and instead refer to the user's manual.

More Questions?


Contact us at ByFloProducts@hotmail.com

Questions & Réponses

1- Le thermomètre ne s'allume pas

Les piles ne sont pas insérées correctement. Veuillez insérer les piles en faisant attention aux pôles + et -. Consultez le Démarrage Rapide pour voir le bon sens d'insertion.

2- Comment activer/désactiver le son ?

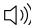1. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton  pour activer ou désactiver le son.
2. L'écran LCD affichera ON lorsque le son est activé et OFF lorsque le son est désactivé.

3- Comment passer de °C à °F?

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton "MODE" pendant 2 secondes. L'écran affichera "F1", puis appuyez sur "Mode" pour basculer entre °C et °F. Appuyez sur le bouton "Mem" pour enregistrer.

4- Comment passer en mode Objet ?

Appuyez sur le bouton "Mode" pour sélectionner le mode "Corps", "Pièce" ou "Température de surface".

5- Pourquoi l'écran affiche "HI" ?

Cela signifie que la température est supérieure au maximum de la plage de mesure : 42,9°C en Mode Corps et 60°C en Mode Température de Surface.

6- Les résultats sont différents par rapport aux autres thermomètres. Est-ce normal?

OUI. Il est normal d'obtenir des résultats différents selon le type de thermomètre utilisé (frontal, auriculaire, oral ou rectal).

VEUILLEZ NE PAS COMPARER LES RESULTATS et référez-vous plutôt au manuel d'utilisation.

Plus de Questions?

Contactez-nous à ByFloProducts@hotmail.com